


管理医療機器 家庭用電気マッサージ器

MACARON

Massage cushion

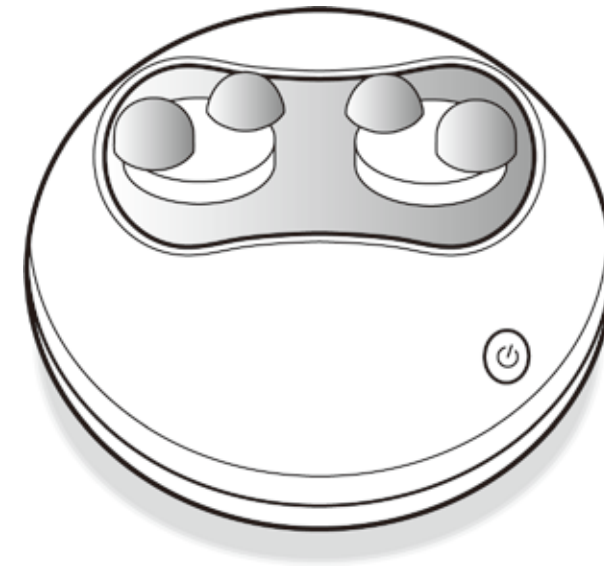

マカロン マッサージクッション MC-301

取扱説明書 保証書付

このたびは、マカロン マッサージクッションをお買い上げいただき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

この製品は一般家庭用です。他の用途でご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。

保証書

持込修理

マカロン マッサージクッション MC-301

お買い上げ日			保証期間	
年	月	日	お買い上げ日より1年間(本体)	

お客様

フリガナ

お名前

様

ご住所 〒

☎

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

- 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
 - (2) お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
 - (3) 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
 - (4) 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障または損傷。
 - (5) 指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。
- お客様の個人情報のお取扱いについて
お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

販売元: 株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5 TEL.03-3279-1511・1512 FAX.03-3279-1515 <http://www.tsukamoto-aim.co.jp/>

製造販売元: 株式会社 **クニシオ** インターナショナル

〒640-1196 和歌山県海南市野上中78-1 TEL.073-487-1311 FAX.073-487-4968



2011年 9月 第3版発行
2011年 3月 第2版発行
2010年12月 初版発行




もくじ

安全にお使いいただくために	1~4
各部の名前とはたらき	5
使用目的/効果または効果	6
ご使用前に	6
使いかた	6~8
お手入れについて	9
主な仕様	9
故障かな?と思ったら	10
保証とアフターサービス	10
保証書	裏表紙

安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる可能性があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告／注意表示について	
 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害*の発生が想定される危害・損害の程度。 *物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について	
この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。	
	警告・注意を喚起する。
	禁止行為を示す。
	指示に基づく行為を強制する。

使用者の体調に関する注意

警告



医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用する前に医師と相談する

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
 - 悪性腫瘍(しゅよう)のある人
 - 心臓に障害のある人
 - 妊娠中や出産直後の人
 - 糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害からくる知覚障害のある人
 - 施療部位に創傷のある人
 - 安静を必要とする人
 - 体温38℃以上(有熱期)の人
例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強いときや、衰弱しているとき
 - 骨粗しょう症の人、脊椎(せきつい)の骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れなどの急性疼(とう)痛性疾患の人
 - 上記以外に、とくに身体に異変を感じている人
- 事故や体調不良をおこすおそれがあります。



次の人は使用しない

医師からマッサージを禁じられている人
例:血栓(そく)症、重度の動脈瘤(りゅう)、急性静脈瘤(りゅう)、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症含む)など症状を悪化させるおそれがあります。



自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人には使用させない
事故やけがのおそれがあります。



子供に使用させない
また、使用中は子供を近づけない
事故やけがのおそれがあります。



頭、胸、腹部へのマッサージに使用しない
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

注意



使用中、からだに異常が現れた場合は、ただちに使用をやめて医師に相談する
そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがあります。



本製品の使用時間は1回15分以内とし、連続使用を避ける
同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。使用しても効果が感じられない場合は、医師または専門家に相談ください。



マッサージ以外の目的には使用しない
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



他の健康用機器や治療器と併用して使用しない
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



食後および飲酒後は使用しない
体調不良をおこすおそれがあります。



使用中は眠らない
事故やけがのおそれがあります。

安全にお使いいただくために

使用に関する注意

警告

電源は交流100Vを使用する
必ず守る
本製品は日本国内専用です。交流(AC)100V以外の電源を使用すると、火災や感電の原因になります。

ご使用前には、必ず本体張地、外カバーが破れていないか確認する
必ず守る
(どんな小さな破れでも、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)

布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
必ず守る
感電や発熱による火災の原因になります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる
必ず守る
プラグにほこり等がたまると湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりしない
禁止

電源コードやプラグの誤った取り扱いは、電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりすることによる感電や火災の原因となります。次のことをお守りください。

- 電源コードを加工したり傷つけたりしない。
- 電源コードを熱器具に近づけない。
- 電源コードの上に重いものを載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
- 電源コードが傷ついたり、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいたりするときは使用しない。
- 電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
- 電源コードを本製品に巻きつけない。
- 電源コンセントや配線器具など、たこ足配線等で定格を超える使いかたはしない。

本体の上にとったり、座ったりしない
禁止
事故やけがのおそれがあります。とくに小さなお子様が進んだりしないようご注意ください。

絶対に分解や改造、修理をしない
分解禁止
感電の原因になります。また発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。

身体がぬれた状態で本製品を使用しない
ぬれ手禁止
感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
ぬれ手禁止
感電の原因になります。

注意

ご使用前には、必ず電源スイッチ、タイマーなどが正常に作動するか確認する
必ず守る
事故やけがのおそれがあります。

動かなくなったときや、異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
電源プラグを抜く

漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。

停電のときはただちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く
電源プラグを抜く

電源プラグがコンセントに差し込まれたままで通電が再開した場合、事故やけがのおそれがあります。

外カバーをはずして使用しない
禁止
事故やけがのおそれがあります。

生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがったもので突き刺したりしない
禁止
けがや故障の原因になります。

本体に水などをこぼさない
禁止
火災や感電、故障の原因になります。

もみ玉に故意に力を加えて無理やり止めない
禁止
けがや故障の原因になります。

本体を落としたり、強い衝撃を与えない
水ぬれ禁止
感電やショート、故障の原因になります。

使用場所についての注意

警告

ストーブなどの火気の近くで使用したり、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない
禁止

火災や感電、故障の原因になります。また、タバコを吸いながらの使用も、火災の原因になります。

注意

本体に布や毛布などをかぶせて使用しない
禁止
本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。

浴室など本体に水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用しない
水場使用禁止
火災や事故、故障の原因になります。

保守についての注意

注意

お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
必ず守る

電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。

長時間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
必ず守る

絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原因になります。

お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない
禁止


変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

長時間使用しなかった場合は、使用前に動作の確認をする
禁止


内部部品が劣化している場合、事故やけがのおそれがあります。清浄に動作しない場合は、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。

各部の名前とはたらき

●● 本体

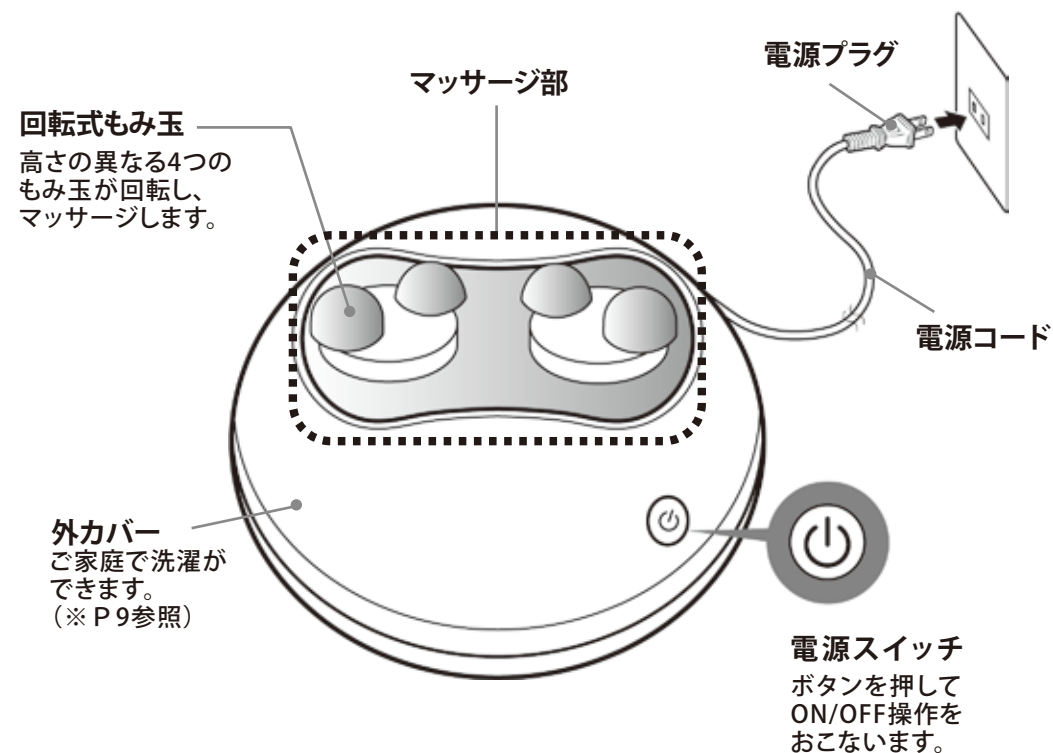

●● 本体を開いた状態

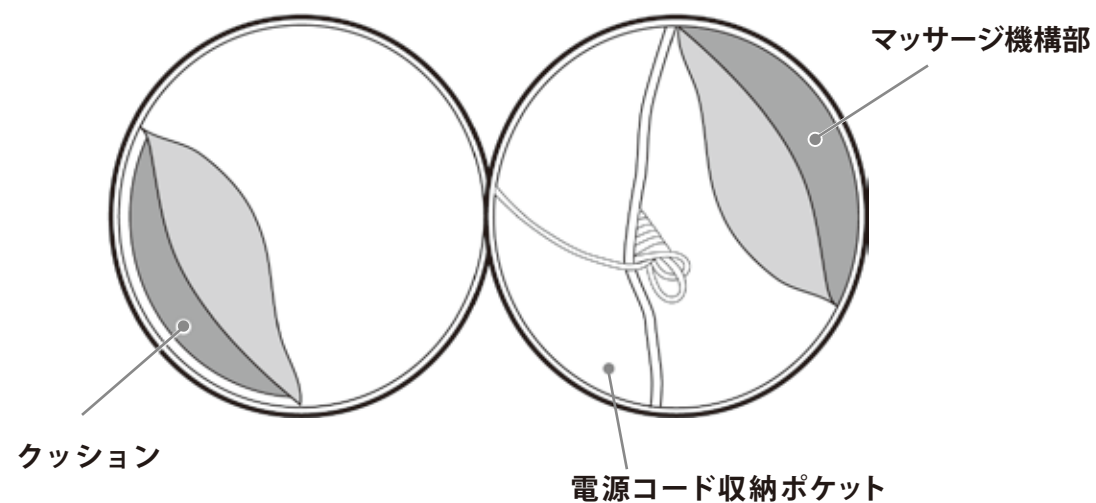

5

使用目的 / 効能または効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

●● ご注意


効能や効果は個人により差があります。

ご使用前に

- 電源コードを確実に接続されているか確認してください。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。
- 本体張地や外カバーが破れていないか確認してください。


使いかた

- 1 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
電源コードが抜け落ちないように、根元まで確実に差し込んでください。

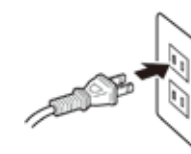

AC100V 50/60Hz

- 2 電源スイッチを押してください。マッサージが開始します。
スイッチは押すごとにON・OFFが切り替わります。

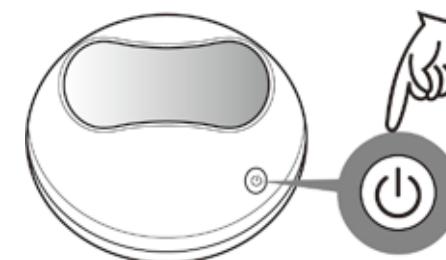

6

使いかた

3 マッサージしたい部位に本体をあててください。

(使用例)



首・肩に




太もも
ふくらはぎに



お好みの位置で

上下を入れ替えると、もみ玉の高さが変わるので、お好きなところに調節してマッサージができます。

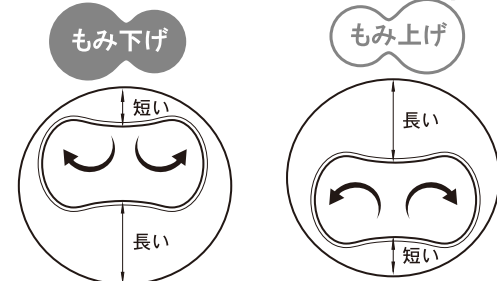


2つのマッサージも体感できます。

■ 本体のファスナーを開いて使用することができます。

■ もみ玉の刺激が強過ぎるときは、タオルなどをあてて感触を調節してください。

4 マッサージが終わりましたら、電源スイッチを押して、動作を停止させてください。

5 電源プラグをコンセントから抜いてください。

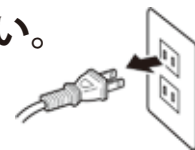

7

■ ご使用時間について

本製品の使用時間は1回15分とし、連続使用はしないでください。同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

■ オートタイマーについて

使いすぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約15分で自動的に止まります。

■ 安全装置について


本体内部の温度が上昇すると、自動停止する過負荷保護装置をつけています。安全装置が働き停止した場合は、しばらく本体を休ませて(約2時間程度)から再度電源スイッチを入れてください。

このようなご使用方法は危険ですので、おやめください。

本体の上に座ってのご使用はおやめください。



こたつの中、または暖房器具の近くで使用しないでください。本体内部の温度が上昇し、安全装置が働き、マッサージが停止する可能性があります。

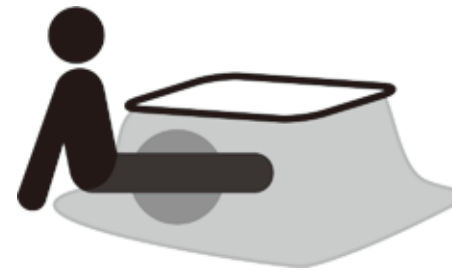

体重が全体にかかるようなご使用はおやめください。

また、布団中での使用はおやめください。本体内部の温度が上昇し安全装置が働き、マッサージが停止する可能性があります。



頭部には使用しないでください。



腹部、頭部には使用しないでください。



8


お手入れについて

- ※ マッサージ機構部カバーは取りはずしできません。
- ※ クッションは洗濯できません。


外カバーはご家庭で洗濯できます。縫付けの選択表示にしたがって、手洗いをしてください。

外カバーを取りはずすときのご注意

電源スイッチ部分の、面ファスナーをゆっくりとはずしてください。

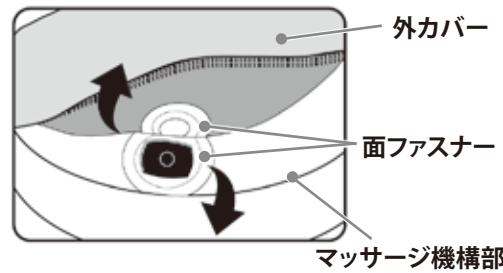

外カバー洗濯絵表示

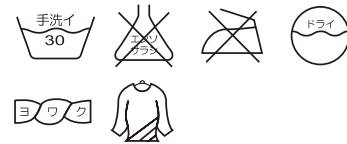

警告 お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。

保管について

使用後は湿気の少ない場所に保管してください。また、長時間使用しない場合は、汚れを取ったあと、布などのカバーをかけ、ほこりがかからないようにご注意ください。

本製品の廃棄方法について

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

主な仕様

販売名	マッサージクッション # 301
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
医療機器認証番号	222AGBZX00236A01
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	35W
定格時間	15分
タイマー	約15分
外形寸法(直径×高さ)・質量	約34cm×約18cm・約2Kg
電源コード長さ	約2m
材質	マッサージ機構部: ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォーム 外カバー: ポリエステル・ナイロン クッション: 不織布・ポリエステル
医療機器製造販売業	株式会社 クロシオインターナショナル 和歌山県海南市野上中78-1
医療機器製造販売業許可番号	30DB2X00001

中国製


故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪いときはただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

症状	調べるところ
●張地とその他がすれる音 ●マッサージ動作時の音	●構造上の音で機能等に影響はありません。
●動作しない	●電源プラグが抜けていませんか? ●オートタイマーが働き停止状態になっていませんか?
●連続使用後にマッサージが止まる	●内部構造の温度上昇のため、安全装置が働いています。しばらく本体を休ませて(約2時間程度)から再度電源スイッチを入れてください。

長年ご使用の「マカロン マッサージクッション」の点検を!

しばらく使用していなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。



愛情点検

こんな症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- 電源コードに深い傷や変形がある
- 焦げ臭いにおいがする
- 動作中に異常な音や振動がする
- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある
- その他異常や故障がある

➤

以上のような症状のときは、故障や事故防止のため、ご使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス

- 保証書(裏表紙)
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用部品の最低保有期間
当社はこのマカロン マッサージクッションの補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しております。(ただし、縫製部品は除きます。)
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。
- ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。
※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。