

家庭用

保証書

持込修理

ポルトトライウォーカー AIM-FN063

お買い上げ日			保証期間
年	月	日	お買い上げ日より1年間(本体)

お客様

フリガナ
お名前 _____ 様

ご住所 〒 _____

☎ _____

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。
 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
 通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
 販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。


- 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
 - (2) お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
 - (3) 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
 - (4) 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障または損傷。
 - (5) 指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。
- お客様の個人情報のお取り扱いについて
 お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

販売元：株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5
 TEL.03-3279-1511・1512 FAX.03-3279-1515

2020年3月初版発行

Trywalker

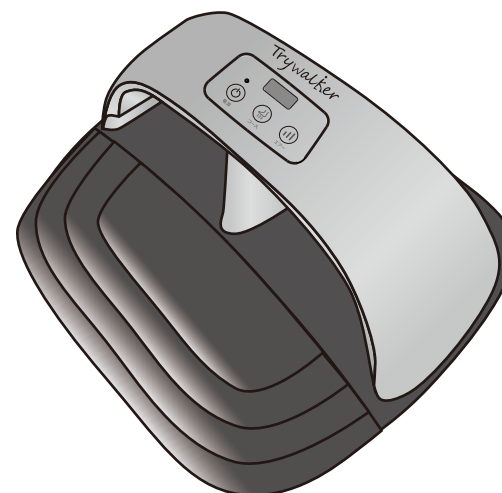

ポルトトライウォーカー

AIM-FN063

取扱説明書 保証書付

このたびは、トライウォーカーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
 この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
 とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
 お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



「ホームページ」のご案内



ホームページでは新製品情報や、商品に関するさまざまな情報をお届けしております。また、お客様の商品購入やお問い合わせにもご対応いただける便利なホームページです。ぜひ、一度ご覧ください。
<http://www.tsukamoto-aim.co.jp/>




もくじ

安全にお使いいただくために……………1~4
 各部の名前とはたらき……………5
 ご使用前に……………6
 使いかた……………7~8
 使用目的/効能または効果……………8
 お手入れについて……………9
 主な仕様……………9
 故障かな?と思ったら……………10
 保証とアフターサービス……………10
 保証書……………裏表紙

安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる可能性があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告/注意表示について	
 警告	警告を守らずに使用した場合、火災や感電などにより使用者の死亡や重傷を伴う事故につながる可能性があります。
 注意	注意を守らずに使用した場合、使用者のけがや周辺の物的損害*を伴う事故につながる可能性があります。 *物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について	
この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の希望を併記して注意を促しています。	
	警告・注意を喚起する。
	禁止行為を示す。
	指示に基づく行為を強制する。


故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪いときはただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
● 動作中の音が気になる	● エアーバッグがふくらむとき、しぼむときの「プシュー」「カチッ」という音。 ● ポンプが動くときの「ブーン」という音。	● 構造上やむをえず発生するもので、機能などに影響はありません。
● 表示が点灯しない ● 動作しない	● コンセントからACアダプターの電源プラグがはずれている。 ● 本体とACアダプターが正しく接続されていない。	● 電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込んでください。 ● 本体のプラグ差込口にACアダプターのDCプラグを差し込んでください。(P6参照)
● 使用中に止まった	● タイマーがはたらき、停止状態になっている。	● 30分以上時間をあけてから、もう一度操作をしてください。

長年ご使用の「トライウォーカー」の点検を!

しばらく使用していなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

 愛情点検	こんな症状はありませんか	以上のような症状の場合は、故障や事故防止のため、ご使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
	● 電源コードやプラグが異常に熱い ● 電源コードに深い傷や変形がある ● 焦げ臭いにおいがする ● 動作中に異常な音や振動がする ● スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある ● その他異常や故障がある	

保証とアフターサービス

※必ずお読みください。

- | | |
|---|--|
| <p>(1) 保証書(裏表紙)
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。</p> <p>(2) 保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理いたします。</p> <p>(3) 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。</p> | <p>(4) 補修用部品の最低保有期間
※
当社はこの「トライウォーカー」の補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しております。
(ただし、縫製部品は除きます)
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。</p> <p>(5) ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら
ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検修理をご依頼ください。
※お客様ご自身の分解・修理は危険です。絶対におやめください。</p> |
|---|--|

修理に関するご相談ならびに不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

【お客様相談窓口】

ナビダイヤル  携帯OK 全国どこからでも 市内通話料でOK

 **0570-081-634**

【受付時間】 祝日を除く 月~金 10:00~17:00 (都合によりお休みさせていただく場合がございます)

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

TEL:03-3279-1511・1512 FAX:03-3279-1515 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

お手入れについて

※本体カバーは取りはずしできません。

- ① 本体、操作パネルの汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- ② 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてください。ただし、本体内部に水などが入らないようご注意ください。
- ③ 自然乾燥させ、よく乾かしてください。



警告 お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。

保管について

使用後は湿気の少ない場所に保管してください。また、長期間使用しない場合は、汚れを取ったあと、布などのカバーをかけ、ホコリがかからないようご注意ください。

本製品の廃棄方法について

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体の取り決めにしたがってください。

主な仕様

販売名	ポルト トライウォーカー・AIM-FN063
使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	36W
ACアダプター定格	型式:IVP2400-1500P 入力:AC100V 50/60Hz 1.0A 出力:DC24V 1.5A
タイマー	約15分
外形寸法(幅×奥行×高さ)	約35× 奥行 26× 高さ 21cm
質量	約2.5kg
ACアダプターコード長さ	約1.8m (ACアダプター含まず)
材質	本体:ABS樹脂 張り地:ポリエステル・TPR(熱可塑性ゴム)
適用足サイズ	22-28cm
専用マット	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	約 38× 奥行 29× 高さ 0.5cm
材質	PVC(ポリ塩化ビニル)
生産国	中国

中国製

使用者の体調に関する注意

警告



医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用前に医師と相談する

- ペースメーカーなど電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
- 悪性腫瘍(しゅよう)のある人
- 心臓に障害のある人
- 糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 変形性関節炎、リウマチ、痛風の人
- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性疼(とう)痛性疾患の人
- 施療部位に創傷のある人
- 体温38℃以上(有熱期)の人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状が強い時期や衰弱しているときなど)
- 妊娠中や出産直後の人
- 安静を必要とする人
- リハビリテーションで使用される人
- 上記以外に特に身体に異常を感じている人

事故や体調不良をおこすおそれがあります。



次の人は使用しない

医師からマッサージを禁じられている人
例:血栓(塞[そく]栓)症、重度の動脈瘤(りゅうう)、急性静脈瘤(りゅうう)、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症含む)など症状を悪化させるおそれがあります。



自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人には使用させない

事故やけがのおそれがあります。

注意



使用中、からだに異常が現れた場合は、ただちに使用をやめて医師に相談する
そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがあります。



1回の使用時間は30分以内する

同じ部位への30分以上の使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



足部以外に使用しない

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



食後および飲酒後、眠気を誘う薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用した人は使用しない

体調不良のおそれがあります。



使用中は眠らない

事故やけがのおそれがあります。



肌の弱い人は素肌で使用しない

摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。

使用に関する注意

警告

必ず守る 必ず交流100Vで使用する
また、付属のACアダプター
(型式:IVP-2400-1500P)以外は使用しない
火災や感電、故障の原因になります。

必ず守る ご使用前には、必ず本体張地、外カバー
が破れていないか確認する(どんな小さな
破れでも、ただちに使用を中止し、電源
プラグを抜き、修理を依頼してください)

生地が破れた状態で使用すると、感電やけ
がのおそれがあります。

必ず守る ACアダプターの電源プラグやDCプラグ
は根元まで確実に差し込む
感電や発熱による火災の原因になります。

必ず守る 電源プラグのほこり等は定期的にとる
プラグにほこり等がたまると湿気等で絶縁
不良となり、火災の原因になります。
定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でふ
いてください。

禁止 接続コードに負荷をかけたり、傷つけ
たりしない

接続コードやプラグの誤った取り扱いは、
接続コードに負荷をかけたり、傷つけたり
することによる感電や火災の原因となりま
す。次のことをご守りください。

- 接続コードを加工したり傷つけたりしない。
- 接続コードを熱器具に近づけない。
- 接続コードの上に重いものを載せたり、無理
に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
- 接続コードが傷ついたり、電源コン
セントへの差し込みがゆるんでいた
りするときには使用しない。
- 電源コンセントから電源プラグを抜く
ときはコードを引っ張らず、必ずACアダ
プター本体を持って抜く。
- 接続コードを本製品に巻きつけない。
- 電源コンセントや配線器具など、たこ足
配線等で定格を超える使いかたはしない。

禁止 足を入れたまま立ったり、座ったりしない
動作中に足を入れたり、抜いたりしない
事故やけがのおそれがあります。
とくに小さなお子様が進んだりしないよう
にご注意ください。

禁止 子供に使用させない
また、使用中は子供を近づけない
子供の手の届くところに保管しない
事故やけがのおそれがあります。

禁止 足に装飾品をつけて使用しない。
事故やけがのおそれがあります。

分解禁止 絶対に分解や改造、修理をしない
感電の原因になります。また発火や異常動
作をして、けがをするおそれがあります。

ぬれ手禁止 体がぬれた状態で本製品を使用しない
感電の原因になります。

ぬれ手禁止 ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。

注意

必ず守る ご使用前には、各種ボタン、タイマー
などが正常に作動するか確認する
事故やけがのおそれがあります。


電源プラグを抜く 動かなくなったときや、異常を感じた
ときは、ただちに使用を中止し、電源
プラグをコンセントから抜く

漏電やショートなどによる感電や火災の原
因になります。お客様による分解・修理はせ
ずお買い上げ販売店に点検・修理を依頼し
てください。

電源プラグを抜く 停電のときはただちに使用を中止し、
電源プラグをコンセントから抜く
電源プラグがコンセントに差し込まれたま
まで通電が再開した場合、事故やけがのお
それがあります。

3

本体の底面が丸みをおびているので、足首を前後に動かすことができます。

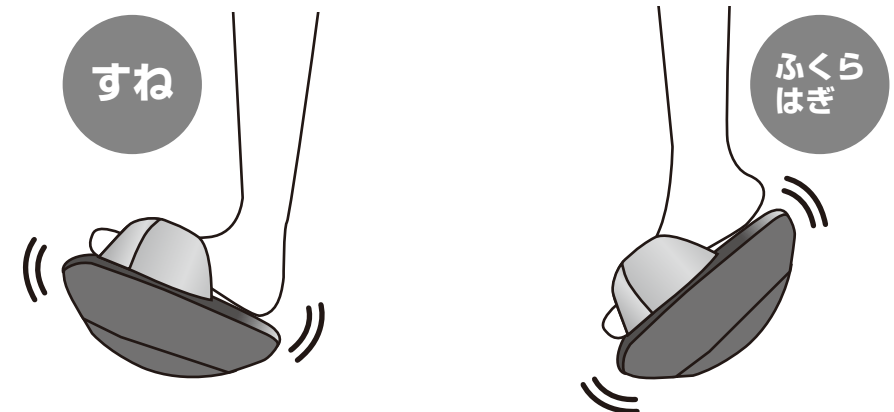


足首を動かすことで、すねとふくらはぎのトレーニングになります。

4

エアーの強さを調節する。

エアー調節ボタンは
押すごとにエアーの
強さが切り替わり、
液晶パネルで表示します。

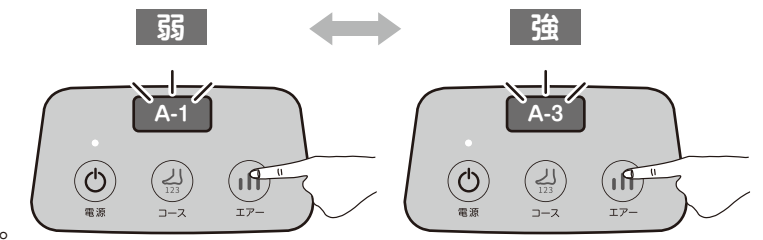

ご注意

初めて使用する場合や使い慣れるまでは「A-1:弱」で使用してください。


5

自動コースが終了したら電源プラグをコンセントから抜く。

各コースとも約15分経過すると自動的に停止します。


ご注意

本製品の使用時間は30分以内としてください。
30分以上の使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

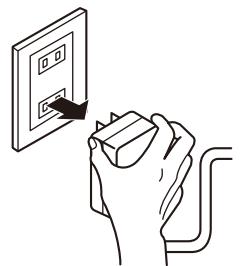

自動コースを途中でやめるには

身体に異常を感じたり、 非常事態がおこった場合は

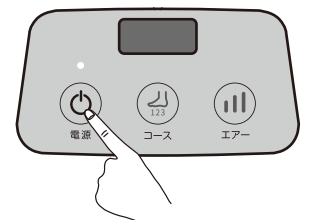


操作パネルの電源ボタン(停止ボタン)を押してください。その場で動作が停止します。
電源プラグをコンセントから抜いてください。


1 本体に足を入れる。

椅子などに深く腰かけて、本体に足を入れます。

足うら

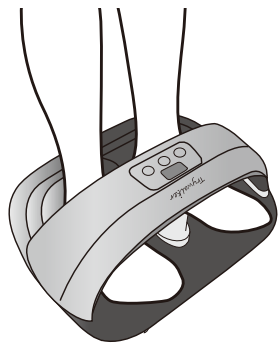

(使用例) 椅子に座ったとき

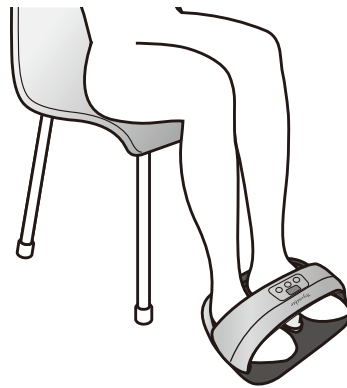

指先でローラーをつかむようにするとより効果的です。

ご注意 椅子に座って使用してください。本体の上に立たないでください。キャスター付きの椅子に座って使用しないでください。

2 コースボタンを選択する。

コースボタンは押すごとにコースが切り替わり、選択されたコースを液晶パネルで表示します。各コースともに動作開始から約 15 分で自動的に終了します。

P-1 リフレコース




ローラーとエアバッグの動作を組み合わせた複合的なコースです。

P-2 トレーニングコース



エアバッグの動作時間が長く、足を固定しながら、すね・ふくらはぎの運動を推奨するコースです。

P-3 リラックスコース

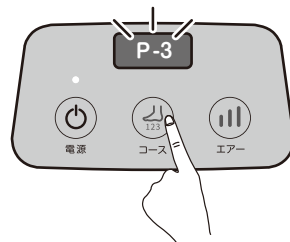

エアバッグの動作とローラーが同時に動く時間が長いコースです。A-1 弱からの使用がおすすめです。

ご注意

- 動作中にコースを変更されると、タイマーが一度リセットされ、15 分以上動作しますのでご注意ください。
- 操作パネルのボタンを2つ以上同時に押さないでください。故障の原因になります。

禁止 生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがったもので突き刺したりしない

電源プラグを抜く 使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
プラグにホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

禁止 本体やACアダプターを落としたり、強い衝撃を与えない
火災や感電、故障の原因になります。

禁止 ローラー部、エアバッグ部に故意に力を加えて無理やり止めない
けがや故障の原因になります。

禁止 本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない

禁止 2人以上で使用しない
けがや故障の原因になります。

水ぬれ禁止 本体や操作部に水などをこぼさない
火災や感電、故障の原因になります。

使用場所についての注意

注意

必ず守る 本製品は突起物がなく、平らで滑りにくい安定した場所で使用する
不安定な場所で使用した場合、使用中に本体が動き出し、事故やけがのおそれがあります。

禁止 本体に布や毛布などをかぶせて使用しない
本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。

禁止 ストーブなどの火気の近くで使用したり、ホットカーペット、電気こたつなどの暖房器具の上で使用しない
火災や事故、故障の原因になります。また、たばこを吸いながらの使用も、火災の原因になります。

禁止 本体を移動するときは引きずらない
床や畳などを傷つけるおそれがあります。

水場使用禁止 浴室など本体に水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用しない
火災や感電、故障の原因になります。

禁止 室温30℃以上の場所や、直射日光のあたる場所で使用しない
本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。また、変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

保守についての注意

注意

電源プラグを抜く お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。


禁止 お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない
変形や変色、変質など本体の外装を傷めるだけでなく、ひび割れによるけがのおそれがあります。

電源プラグを抜く 長時間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原因になります。


必ず守る 長時間使用しなかった場合は、使用前に動作の確認をする
内部部品が劣化している場合、事故やけがのおそれがあります。正常に動作しない場合は、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。

各部の名前とはたらき

● 本体

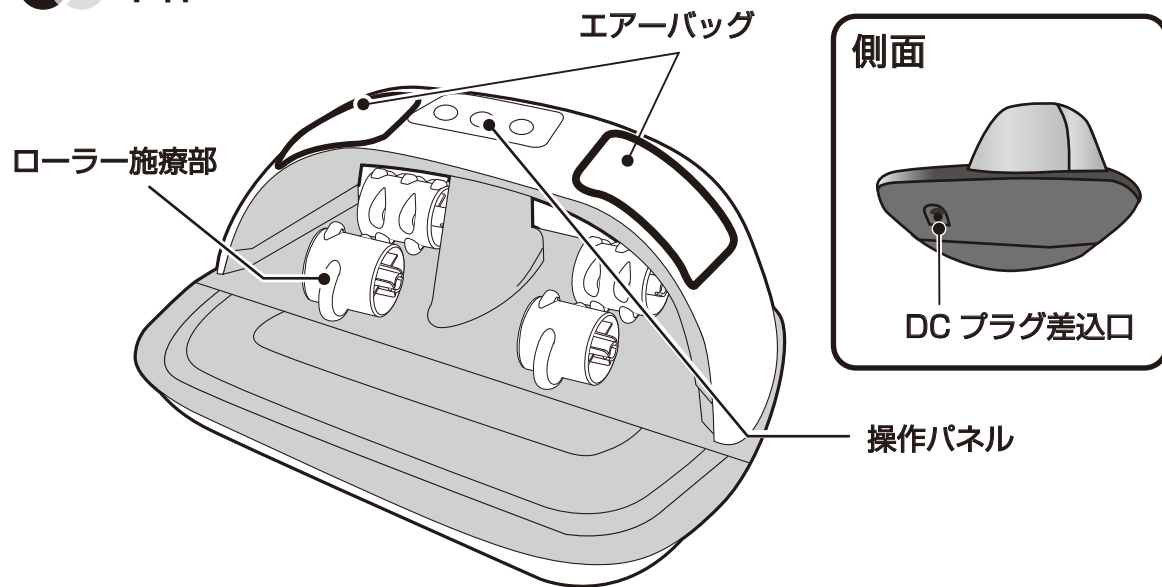


● 操作パネル

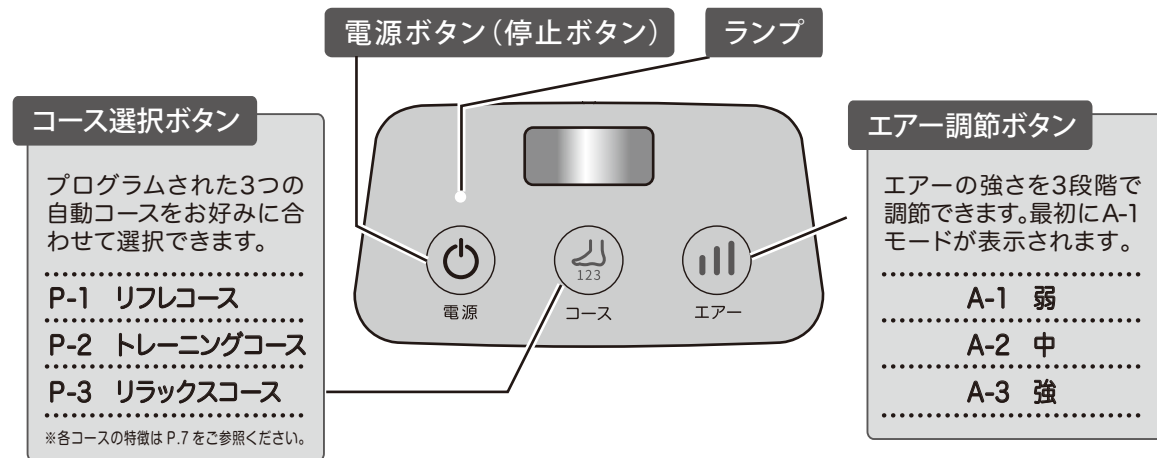

● 付属品


- ACアダプター (型式: IVP2400-1500P)

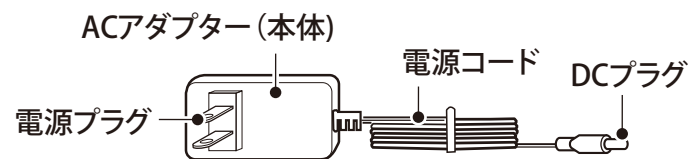

⚠ 警告 付属のACアダプター以外は使用しないでください。

ご使用前に

1 本体を設置する。

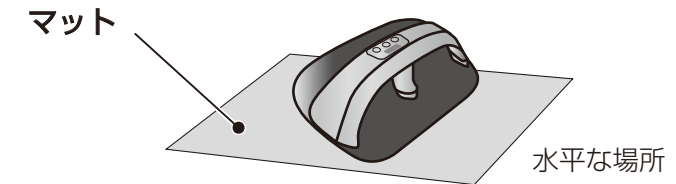


- 本体を周囲に障害物のない床面が水平な安定した場所を選び設置します。テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。また、同じコンセントを使用しないでください。AV機器に雑音が入ることがあります。
- 床やカーペットの上に直接設置すると、汚れる場合があります。
- マットなどを敷いた上に設置されることをおすすめします。

2 本体カバーが汚れていないか確認する。

ご使用前には、必ず本体カバーが破れていないか確認してください。布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

3 ACアダプターを本体と接続し、コンセントに差し込む。

- ① 本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを根元までしっかりと差し込みます。
- ② コンセントにACアダプターの電源プラグを根元までしっかりと差し込みます。

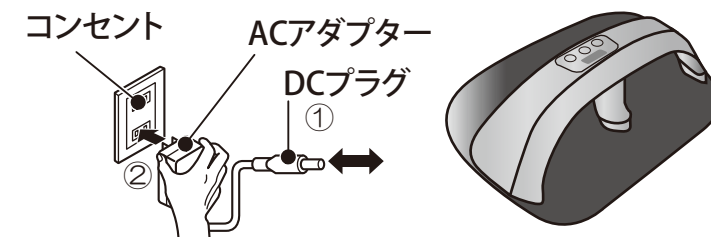

⚠ 警告 付属のACアダプター以外は使用しないでください。