

ULTRA WAVE SWITCH

ポルト ウルトラウェーブスイッチ

AIM-FN075

取扱説明書 保証書付



port@

ULTRA WAVE SWITCH

ポルト ウルトラウェーブスイッチ AIM-FN075

安全にお使いいただくために	2
各部の名称とはたらき	7
ご使用前に	9
使い方	11
お手入れについて	14
仕様	14
故障かな？と思ったら	16
点検について	16
保証とアフターサービス	17
保証書	裏表紙

このたびは、ポルト ウルトラウェーブスイッチを
お買い上げいただき、ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、取り扱いを誤ると大きな事故につながる可能性があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告 / 注意表示について



取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。



取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される危害・損害の程度。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について

この取り扱い説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。



中の絵や近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵や近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

使用者の体調に関する注意

警告



必ず守る

医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用前に医師に相談する

- ・ペースメーカーなど電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍（しゅよう）のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・現在腰痛の人や、過去に腰や背中、足を痛めたことのある人
- ・変形性関節炎、リウマチ、痛風の人
- ・骨粗しょう症など骨に異常のある人
- ・脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性疼（とう）痛性疾患の人
- ・循環器系障害（心臓病、血管障害、高血圧症、高度な糖尿病など）のある人
- ・急性症状のある人
- ・足裏に傷のある方
- ・体温 38℃以上（有熱期）の人
- ・薬を服用中の方
- ・適用部位の皮膚に異常のある方
- ・体内にボルト等の金属を埋め込んでいる方
- ・妊娠中や生理中の人
- ・安静を必要とする人
- ・医師から運動を禁じられている人
- ・リハビリテーションで使用される人
- ・上記以外に、とくに身体に異常を感じている人

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る

自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人には使用させない

事故やけがのおそれがあります。



禁止

次の人は使用しない

医師から運動を禁じられている人
例：血栓（塞[そく]栓）症、重度の動脈瘤（りゅう）、急性静脈瘤（りゅう）、各種皮膚炎、各種皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など症状を悪化させるおそれがあります。



禁止

子供に使用させない

また、使用中は子供を近づけない
事故やけがのおそれがあります。



禁止

頭や腹部などへは使用しない

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

注意



必ず守る

使用中に、身体・肌に異常を感じたときは、ただちに使用をやめて医師に相談する

使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、肌荒れ、発疹、赤み、かゆみやけど、炎症などの異常があらわれたりしたときは使用を中止し、医師に相談してください。そのまま使用を続けると症状悪化につながるおそれがあります。



必ず守る

1回の使用時間は10分以内にする

筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る

体力に自信のない人や初めてお使いの人は無理な運動はしない

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る

使用目的以外の使い方をしない

また、他の機器と同時に使用しない
事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る

食後および飲酒後は使用しない

体調不良をおこすおそれがあります。

使用に関する注意



警告



必ず守る

必ず交流 100V で使用する

火災や感電の原因になります。



必ず守る

電源プラグ、コネクタは根元まで確実に差し込む

感電や発熱による火災の原因になります。



必ず守る

電源プラグのホコリ等は定期的にとる

プラグにホコリ等がたまと湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



必ず守る

初めて使用する方や、慣れていない方は、本体に乗るときは椅子の背もたれまたは壁などに手を添え、身体を支えながら乗る

本体に傾斜があるためバランスを崩して転倒する恐れがあります。



必ず守る

本体に乗ったときは、つま先またはかかとをステップ先端に合わせて使用する

本体に傾斜があるためバランスを崩して転倒する恐れがあります。



禁止

他の電気製品・美容機器などとは併用しない

体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりしない

電源コードやプラグの誤った取り扱い、電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりすることによる感電や火災の原因となります。
次のことをお守りください。

- ・電源コードを加工したり傷つけたりしない。
- ・電源コードを熱器具に近づけない。
- ・電源コードの上に重いものを乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
- ・電源コードが傷ついていたたり、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいたたりするときは使用しない。
- ・電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
- ・電源コードを本製品に巻き付けない。
- ・電源コンセントや配線器具など、たこ足配線等で定格を超える使いかたはしない。

電源コードが破損した場合は、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



禁止

本体の上で飛んだり跳ねたりしない

事故やけがのおそれがあります。
とくに小さなお子さまが遊んだりしないようご注意ください。

**次の部位には使用しない**

頭部や腹部・傷口などの粘膜部・金属、プラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる部位。

EMSを使用する場合は足裏以外に使用しないでください。

**動作中、ステップや本体の隙間や下に手や指を入れない**

事故やけがのおそれがあります。



分解禁止

絶対に分解や改造、修理をしない

感電の原因になります。また発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因になります。



必ず守る

ご使用前には、必ず電源スイッチ、リモコン、タイマーなどが正常に動作するか確認する

事故やけがのおそれがあります。



必ず守る

リチウムコイン電池の取り扱いには下記の項目に注意する

- ・リチウムコイン電池は⊕⊖極を確かめ正しく入れる
- ・使い切ったリチウムコイン電池はすぐに取り外す
- ・長時間使用しないときは、リチウムコイン電池を取り外す
- ・使用推奨期限内のリチウムコイン電池を使用する

乾電池の発熱や破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

ホコリや湿気で絶縁不良となり、漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。

**体重が 90kg 以上の人は使用しない**

事故や故障の原因になります。

**動作中にステップの乗り降りはしない**

転倒によるけがのおそれがあります。

**同時に 2 人以上で使用しない**

事故や故障の原因になります。

**運動に適した服装でおこない、裸で使用しない**

事故やけがのおそれがあります。

**使用中、手や足が汗ばんできた場合は、使用を一時中止し乾いたタオルなどでふぎとる**

転倒によるけがや故障の原因になります。

**EMS モードは素足で使用する SPEED モードのみの場合は素足または運動靴で使用する**

事故やけが、転倒の原因となります。また、色落ちや色移りのおそれがあります。

**本体に重いものを置いたり、落としたり、強い衝撃を与えない**

火災や感電、故障の原因になります。

**本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない**

水ぬれ禁止

本体に水などをこぼさない

火災や感電、故障の原因になります。

使用場所についての注意

注意



必ず守る

周囲に障害物のない、
床面が水平な場所に設置する
事故やけがのおそれがあります。



禁止

ストーブなどの火気の近くで使用したり、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない
火災や事故、故障の原因になります。また、たばこを吸いながらの使用も、火災の原因になります。



禁止

本製品を移動するときは、引きずらないようにする
床を傷つけるおそれがあります。



禁止

直射日光の当たるところでは使用しない
変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。



水場使用
禁止

浴室など本体に水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用しない
火災や感電、故障の原因になります。



禁止

事故やケガ、感電、破損、汚れなどのおそれがある浴室など湿度の高いところでは使用しない

保守についての注意

注意



プラグを抜く

お手入れをするときは、
必ず電源プラグをコンセントから抜く
電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。



プラグを抜く

長時間使用しない場合は、
必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原因になります。



必ず守る

長時間使用しなかったときは、使用前に動作の確認をする
内部部品が劣化している場合、事故やけがのおそれがあります。正常に動作しないときは、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。




禁止

お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない
変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。


各部の名前とはたらき

●本体

上から見た本体

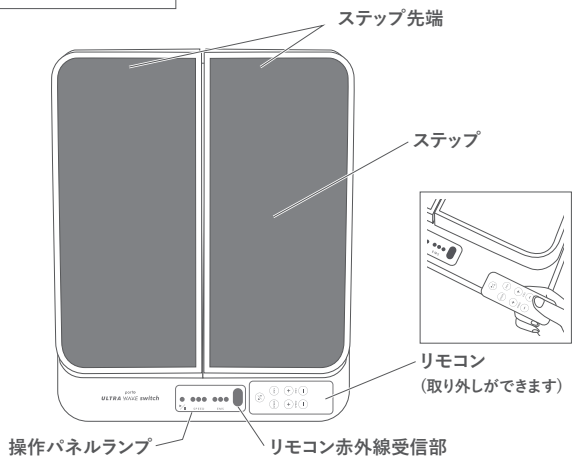

側面から見た本体

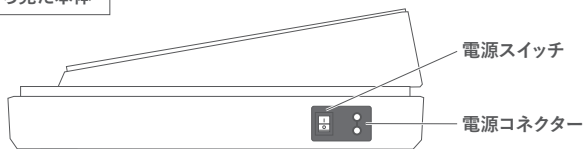

●付属品

電源コード



リモコン


リチウムコイン電池
CR2025 1個同梱




マット



●操作パネル

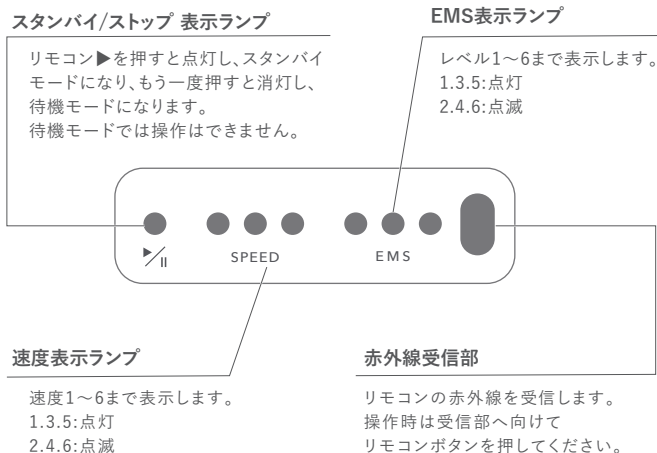

●リモコン

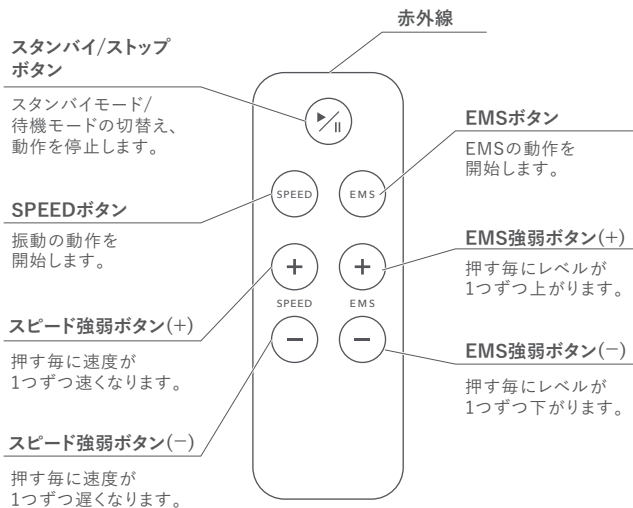

※リチウムコイン電池CR2025 1個使用

ご使用前に


1 本体を設置する

- 周囲に障害物のない、床面が水平な場所を選び設置する。
- 床を傷つけないよう、必ずマットなどを敷いてください。




ご注意

- 本製品を置くときや移動する場合は、しっかり持つておこなってください。
- 湿気の多い場所や、結露する場所などでは避けてご使用ください。

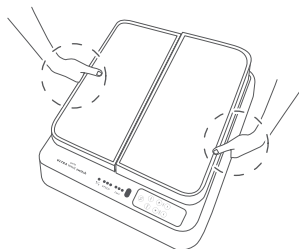

2 リモコンにリチウムコイン電池がセットされているか確認する


- リチウムイオン電池「CR2025」が1個同梱されています。
- 絶縁シートを外してからご使用ください。
- 電池の交換については、P15のリチウムコイン電池交換についてを確認してください。

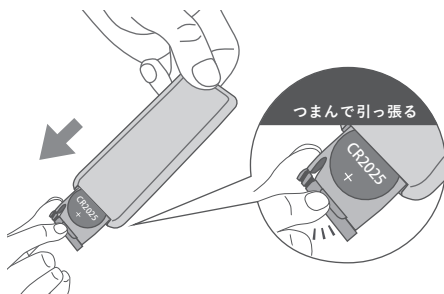

- 3 電源コードをコネクタに接続し、
電源プラグをコンセントに差し込む




電源プラグはコネクタに根元まで確実に差し込んでください

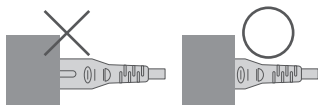

- 4 電源スイッチを入れる


- 「ピッ」と音が鳴り操作パネルの「スタンバイ / ストップ」ランプが点灯します。
- ※「電源スイッチ」は本体側面（P7 参照）にあります。

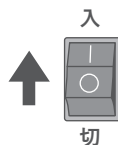

- 5 リモコンの「SPEED」もしくは「EMS」ボタンを押す

- 「SPEED モード」もしくは「EMS モード」がスタートします。
- ※約 1 分間操作をしないと操作パネルのランプが消灯し、待機モードになります。
- ※待機モードのときに「スタンバイ / ストップ」ボタンを押すと、スタンバイモードになります。
- ※待機モードのときは操作できません。

SPEED ボタン
EMS ボタン

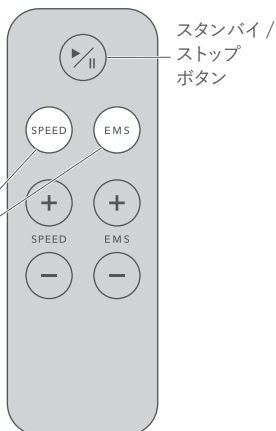

使い方



使い始めや慣れるまでは、本体に乗るときは椅子の背もたれまたは壁などに手を添え、身体を支えながら乗る。

SPEEDモード

椅子の背もたれまたは壁に手を添えてバランスをとります。

- 1 電源スイッチを押して、電源を入れる。
リモコンの SPEED ボタンを押すと動作が開始します。
- 2 スピードを調節する。
リモコンの SPEED 調節ボタン「+/-」を押してスピードを 1-6 段階に調節します。



EMSモード ※EMSとは電氣的に筋肉を刺激する働きがあります。

EMSを使用するときは、座って使用してください。
初めてご使用になられる際は、弱いレベルからご使用ください。

- 1 電源スイッチを押して、電源を入れる。
リモコンの EMS ボタンを押すと動作が開始します。
- 2 強弱を調節する。
リモコンの EMS 調節ボタン「+/-」を押して EMS 1-6 段階に調節します。
※振動の動作中に EMS ボタンを押すと振動とEMSを同時に使用することができます。



※EMSが弱いと感じるときは、足裏を湿らせてご使用ください。
お風呂上りなど足裏の水分量が十分なきも効果的です。
※特に冬場は皮膚が乾燥しやすくなるため、EMSが感じにくくなります。
十分保湿してからご使用ください。



注意

EMS モードは素足で使用する。
SPEED モードのみの場合は素足または運動靴で使用する。

本体を直接水でぬらさないでください。

立ち位置について

■ 基本立ち位置

左右それぞれの中心に立ち、
つま先を必ず本体の先端に合わせます。



■ 上級立ち位置…より負荷をかけたいときに

左右それぞれの中心に立ち、
かかとを必ず本体の先端に合わせます。



終了するとき

10分後、動作が自動で停止します。


■ 動作を途中でやめるには

リモコンのストップボタンを押すと動作が停止します。

■ 動作が終了したら

電源スイッチを切り、電源プラグをコンセント
から抜いてください。

スタンバイ /
ストップ ボタン


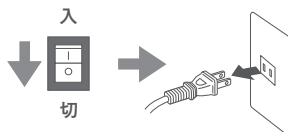


効果的な使い方

■ 直立

ひざを少し曲げ、足を開き直立姿勢をとる。

【部位】腹筋、ヒップ

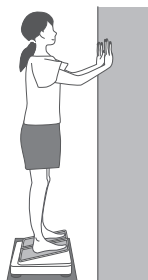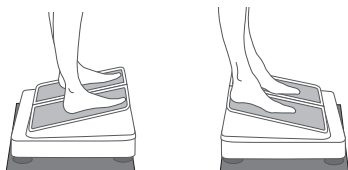

■ 足曲げ

床に座り、機器に両足を乗せる。
両手で体を支える。

【部位】ふくらはぎ



■ 両足のせ

背筋を伸ばして椅子などに座り、
両足を乗せる。


【部位】脚



■ ひざ曲げ

中腰姿勢で、しっかりと
両足に力を入れる。

【部位】ヒップ、太もも内側

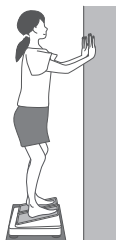

■ 両手のせ

腰を上げて、機器に両手をつく。
速度はゆっくり。


【部位】肩まわり、二の腕



■ ふくらはぎのせ

床に座り、機器にふくらはぎを乗せる。
両手で体を支える。

【部位】ふくらはぎ

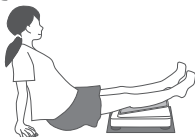


■ EMS 使用時

EMS を使用するときには
慣れるまで座って
使用してください。

お手入れについて ※本体カバーは取り外しできません。

- ① 本体、操作パネルの汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- ② 汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませた布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてください。
ただし、本体内部に水などが入らないようご注意ください。
- ③ 自然乾燥させ、よく乾かしてください。

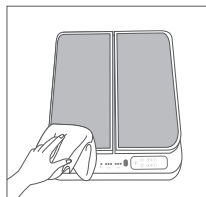

警告

お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。

保管について

使用後は湿気の少ない場所に保管してください。また、長時間使用しない場合は、汚れを取ったあと、布などのカバーをかけ、埃がかからないように保管してください。

本製品の廃棄方法について

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体の取り決めにしたがってください。

仕様


商品名・型番	ポルト ウルトラウェーブ スイッチ AIM-FN075
使用電源	AC100V50/60Hz
消費電力	90W
適応体重	90kg未満
オートタイマー	約10分
振動回数	最小:417回/分 最大:1050回/分 (±10%)
速度調節	6段階(最少:1~最大:6)
外形寸法	(約)幅318×奥行364×高さ148 mm
質量	約8.5kg(電源コード除く)
電源コード長さ	約1.5m
材質	本体:ABS樹脂・導電TPR
付属品	リモコン(リチウムコイン電池 CR2025 1個)・電源コード・マット
原産国	中国

リモコンの電池交換について（リチウムコイン電池 CR2025）

リモコンの電池を交換する場合は、リモコン裏面の蓋のつまみを指または爪で内側へ押し込み、押し込んだまま手前側へ引いてください。

+（プラス）側が上になるようコイン電池を挿入して蓋を閉めてください。

※しばらく使用しない時は、リモコンからリチウムコイン電池ははずしてください。

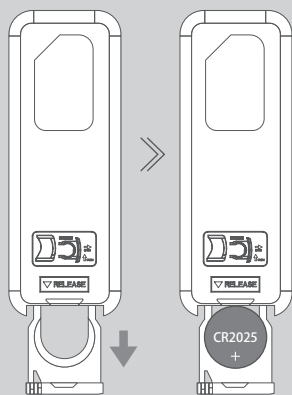

上図のような位置になるよう設置する。

注意

- 電池や製品を幼児の手の届くところに置かない。誤飲の可能性あります。
万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談して下さい。
- 真夜中など近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

「毒性に関するお問い合わせ先」
(財)日本中毒情報センター 中毒110番
(大阪)072-727-2499 (24時間対応)

故障かな？と思ったら


修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。

それでも調子が悪い場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

こんな時は	考えられる理由	このように処置してください
動作中の音が 気になる	<ul style="list-style-type: none"> ○モーター音の振動による「ブーン」という音。 ○傾いている場所や不安定な場所に設置した際の本体のがたつき音。 	<ul style="list-style-type: none"> ○構造上発生するもので異常ではありません。 ○水平で安定した場所に設置してください。
表示が点灯しない / 動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ○電源プラグや電源コネクターがはずれている。 ○電源スイッチが入っていない。 	<ul style="list-style-type: none"> ○電源プラグや電源コネクターを奥までしっかりと差し込んでください。 ○電源スイッチを入れてください。
使用中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> ○タイマーがはたらき、停止状態になっている。 ○連続使用によるモーターの過熱で安全装置がはたらき停止状態になっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ○もう一度操作をしてください。 ○電源スイッチを切り、30分以上あけてから、もう一度電源を入れてください。
EMSを感じない	<ul style="list-style-type: none"> ○肌が乾燥している可能性がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ○肌を十分に湿らせてからご使用ください。 ※特に冬場は、皮膚が乾燥しやすくなるため、EMSを感じにくくなります。十分保湿してからご使用ください。

点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

 <p>愛情点検</p>	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードやプラグが異常に熱い ●電源コードに深い傷や変形がある ●焦げ臭いにおいがする ●動作中に異常な音や振動がする ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある ●その他異常や故障がある 	<p>以上のような症状の場合は、故障や事故防止のため、ご使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。</p>
---	--	---

■ 保証について

(1) 保証書（裏表紙）

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。

(2) 保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載内容に従って修理をいたします。

保証期間中でも有料になる場合もありますので、保証書の内容をよくお読みください。

(3) 保証期間経過後の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料で修理いたします。費用など詳しいことは、お買い上げ販売にご相談ください。

(4) 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

(5) 部品の消耗による部品交換およびメンテナンスの費用は、保証期間内でも有料となります。

(6) ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼ください。

お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

■ アフターサービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。アフターサービスをお申し付けの際は、下記内容をお知らせください。

型番 …… AIM-FN075
故障状態 …… できるだけ詳しく
ご氏名・ご住所・お電話番号

■ 送料規定

保証期間中の修理品の送受方法について、弊社では原則センドバック方式（お客様にて弊社修理窓口に発送いただく方法）とさせていただきます。

往路：お客様負担 / 復路：弊社負担

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口」へお問い合わせください。

保証書

持込修理

ポルト ウルトラウェブスイッチ AIM-FN075

ご購入日

保証期間:お買い上げ日より1年間

お客様

お名前

TEL

ご住所 〒

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

1.取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

2.本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

3.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

- ① 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
- ② お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
- ③ 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
- ④ 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障、または損傷。
- ⑤ 指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。

4.お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

製造販売元:株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

TEL.03-3279-1511・1512 FAX.03-3279-1515 www.tsukamoto-aim.co.jp

2022年12月初版発行